

**Read the instructions carefully before use**

### Valid for 1 patient

- 1 syringe of dental whitening gel, NATURAL<sup>+</sup>™, 6% stabilized hydrogen peroxide, 7ml
- 2 application trays custom made for you by your dental surgeon
- 1 application tray case
- 1 toothbrush in a case
- 1 syringe of pH neutral stain-removing gel for use exclusively by professionals, Powerprep<sup>+</sup>™, 1.2g
- 1 tip
- 1 gentle stain-removing toothpaste, Powerprep<sup>+</sup>™, 30ml
- 1 tube of nourishing and soothing treatment, #5, 5ml
- 1 container with dental floss and mirror
- 1 shade guide

### Precautions:

Store in a cool place, away from sunlight.

Keep out of reach of children.

Do not swallow. If swallowed, consult a doctor.

Pregnant or breastfeeding women must consult their doctor before use.

Do not use under the age of 18.

Can only be sold to a dentist.

Teeth whitening procedure is an act dedicated to the dental practitioners only.

Specialist only can make a diagnosis of your teeth before use; required before every teeth whitening procedure.

Professional only is allowed to give you instructions for use after a first treatment performed at the clinic and inform you about eventual contraindications.

Products to use under the strict supervision of the dentist.

Avoid contact with eyes. In case of accidental contact, rinse thoroughly and consult a doctor.

### Warnings:

Consumers of alcohol and/or tobacco should refrain from smoking and/or drinking as much as possible throughout the duration of the NATURAL<sup>+</sup>™ dental whitening gel treatment, in order to receive optimal results. Do not apply the NATURAL<sup>+</sup>™ dental whitening gel to teeth with metal amalgams.

*Reminder: The products included in this kit have to be used under the strict supervision of a dentist only.*

### Instructions:

#### For dentists (in the clinic):

1. Check the starting shade with a shade guide and mark it.
2. With this patient box comes a box of 6 syringes each containing 7ml of NATURAL<sup>+</sup>™ dental whitening gel, 6% stabilized hydrogen peroxide. One of these syringes should be added to this kit.
3. Make unique thermoforming application trays for your treatment at the clinic and the patient's use at home and place them in the application tray case. It is not recommended to make a reservoir in the trays
4. Use the trays and apply a small drop of the neutral pH stain-removing gel, Powerprep<sup>+</sup>™ into each tooth location after positioning the tip on the syringe.  
Apply the gel on both buccal and lingual sides.  
Leave the trays in the patient's mouth for 15 minutes; then, remove them and rinse patient's mouth.  
Rinse the trays, dry them thoroughly and reuse them for the teeth whitening procedure.
5. Rotate the syringe plunger anticlockwise to unlock the dispenser.



Fig. 1



Fig. 2

Apply the NATURAL<sup>+</sup>™ dental whitening gel by pressing on the syringe plunger.


A dispenser built into the mechanism releases the required quantity for each tooth.

Rotate the syringe plunger clockwise to lock it and avoid unintentional use. (see Fig. 1,2)

6. Place the application trays on the teeth.  
It is not necessary to close the jaws more firmly in order to obtain better results.
7. Leave them in the mouth for an hour to an hour and a half.
8. Remove the application trays, and then rinse the mouth.  
Thoroughly rinse and dry the application trays and return them to their case, for the next session performed at home by the patient, according to the dentist's instructions.
9. Apply the nourishing and soothing gel to the teeth and gums, massaging steadily to avoid residual sensitivity.
10. Check the achieved shade with a shade guide and compare with the starting shade.

#### **For patients (at home):**

1. Use the shade guide and mark with a cross the starting shade.
2. Take the toothbrush provided with the kit and brush the teeth thoroughly for 3 minutes using the gentle stain-removing toothpaste, **Powerprep+™**, provided in the kit.  
Complete this stage by using the dental floss and pay particular attention to the spaces between the teeth.
3. Take the application trays given to you by your dental surgeon.
4. Rotate the syringe plunger anticlockwise to unlock the dispenser.

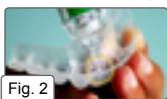

A dispenser built into the mechanism releases the required quantity for each tooth.  
Rotate the syringe plunger clockwise to lock it and avoid unintentional use. (see Fig. 1,2)

5. Place the application trays on the teeth.  
It is not necessary to close the jaws more firmly in order to obtain better results.
6. Leave them in the mouth for an hour to an hour and a half.
7. Remove the application trays, and then rinse the mouth.  
Thoroughly rinse and dry the application trays and return them to their case, for the next session performed at home by the patient, according to the dentist's instructions.
8. Apply the nourishing and soothing gel to the teeth and gums, massaging steadily to avoid residual sensitivity.
9. Repeat this full process daily, as instructed by your dentist.
10. Check the achieved shade with the shade guide and compare with the starting shade.

#### **Ingredients:**

##### ■ **Dental whitening gel NATURAL<sup>®</sup>™ / Activator, 7ml**

Gel: Aqua, Hydrogen Peroxide, Silica, PE6-8

Activator: Aqua, Glycerin, Carboxymethylcellulose, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Dead Sea Salt (natural), CI 14720

##### ■ **Neutral pH stain-removing gel, Powerprep+™, for use exclusively by professionals, 1.2g**



Distilled Water, Citric Acid, Potassium Nitrate, Fumed Silica, Pigments

##### ■ **Gentle stain-removing toothpaste, Powerprep+™, 30ml**

Sorbitol 70%, Water (Aqua), Hydrated Silica, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Citrate, Sodium Monofluorophosphate, Cellulose Gum, Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Titanium Dioxide, Flavour (Supplement), Sodium Saccharin, Sodium Methylparaben, Sodium Propylparaben.

##### ■ **Nourishing and soothing treatment, #5, 5ml**

Aqua, Potassium Nitrate, Sea salt, Polysorbate 20, Cellulose Gum, Aroma, Sodium Methylparaben, Potassium Sorbate, Dicalcium Phosphate, Eugenol, Eugenia Caryophyllata, Sodium Fluoride, Isoeugenol



■ **Store in a cool place, away from sunlight**

Fab. : Meodental, 1, place Paul Verlaine - 92100 Boulogne Billancourt - France

**info@meodental.com ■ www.meodental.com**

 Lire attentivement la notice avant utilisation

## Valable pour 6 patients

- 1 seringue de gel de blanchiment dentaire NATURAL+™ à 6 % de peroxyde d'hydrogène stabilisé, 7 ml
- 2 plaques à gouttières
- 1 boîtier à gouttières
- 1 brosse à dents dans son étui
- 1 seringue de gel détachant, Powerprep+™, de pH neutre, à l'usage exclusif des professionnels, 1,2 g
- 1 applicateur
- 1 dentifrice doux anti-taches, Powerprep+™, 30 ml
- 1 tube de soin nourrissant et apaisant, #5, 5 ml
- 1 porte-fil avec fil dentaire et miroir
- 1 nuancier

## Précautions d'emploi :

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil.

Tenir hors de la portée des enfants.

Ne pas avaler. En cas d'ingestion, consulter un médecin.

Les femmes enceintes ou allaitantes doivent demander conseil à leur praticien avant utilisation.

Ne pas mettre en contact avec les yeux. En cas de projection accidentelle, rincer abondamment et consulter un médecin.

Ne convient pas aux personnes de moins de 18 ans.

Ne peut être vendu qu'aux chirurgiens-dentistes.

Les traitements de blanchiment dentaire sont des actes de la pratique dentaire. Leur réalisation est donc réservée exclusivement aux chirurgiens-dentistes.

Seuls les praticiens dentaires peuvent effectuer un bilan complet obligatoire de la denture avant d'entamer une procédure de blanchiment dentaire.

Seuls les professionnels de la santé dentaire sont formés pour informer le patient d'éventuelles contre-indications et des précautions à prendre selon le cas clinique. Ils sont également les seuls à être habilités à donner les instructions à suivre au patient après que la première session du traitement ait été réalisée au cabinet dentaire par leurs soins.

## Mises en garde :

Les personnes consommatrices de tabac et/ou d'alcool doivent respecter un délai de 48 heures après utilisation de NATURAL+™ durant lequel elles doivent autant que possible s'abstenir de fumer et/ou de boire, afin d'obtenir des résultats optimaux. Ne pas appliquer le gel de blanchiment dentaire NATURAL+™ sur les dents comportant des amalgames métalliques.

*Rappel : Les produits de ce coffret ne peuvent être utilisés que sous la stricte supervision du chirurgien-dentiste*

## Mode d'emploi :

### A l'attention du dentiste :

1. Repérer sur un nuancier la teinte de départ.
2. Ce coffret est accompagné d'un autre coffret comprenant 6 seringues de 7ml de gel de blanchiment dentaire NATURAL+™ à 6% de peroxyde d'hydrogène stabilisé. Une seringue doit être incorporée et ajoutée aux autres composants du coffret principal.
3. Se munir des plaques afin de réaliser des gouttières thermoformables à l'usage unique du patient et les ranger dans leur boîtier avant de les replacer dans le coffret. Il n'est pas nécessaire de former un réservoir dans la gouttière.
4. Utiliser les gouttières et les remplir d'une goutte pour chaque empreinte avec le gel détachant de pH neutre, Powerprep+™, après avoir fixé sur l'embout de la seringue l'applicateur fourni dans le kit. Positionner les gouttières sur les dents du patient et laisser poser 15 minutes.  
Ôter les gouttières et rincer la bouche du patient.  
Rincer et sécher les gouttières avant de les utiliser de nouveau pour le traitement de blanchiment dentaire.
5. Faire pivoter le piston de la seringue afin de déverrouiller le mécanisme. Appliquer le gel de blanchiment dentaire NATURAL+™ par pression sur le piston de la seringue, un doseur intégré dans le mécanisme libère la quantité nécessaire à chaque dent. Faire pivoter le piston après usage afin de verrouiller le mécanisme (sécurité). (Voir fig. 1,2)



Fig. 1



Fig. 2

- Placer les gouttières sur les dents. Il n'est pas nécessaire de serrer fermement les mâchoires pour obtenir un meilleur résultat.
- Laisser poser dans la bouche pendant une heure, voire une heure et demie.
- Ôter les gouttières, puis rincer la bouche du patient.  
Rincer soigneusement les gouttières, les sécher et les replacer dans leur boîtier pour la prochaine séance que le patient réalisera à domicile, selon les instructions du chirurgien-dentiste.
- Appliquer le soin nourrissant et apaisant sur les dents et les gencives, en massage régulier, dans l'éventualité d'une sensibilité résiduelle.
- Repérer sur le nuancier la teinte obtenue après traitement et comparer avec la teinte de départ.

#### **A l'attention du patient :**

- Marquer d'une croix la teinte de départ sur le nuancier.
- Se munir de la brosse à dents fournie dans le coffret et se brosser les dents pendant 3 minutes en utilisant le dentifrice doux anti-taches, Powerprep<sup>+</sup>, également fourni.  
Compléter le brossage à l'aide du fil dentaire et bien insister sur les espaces interdentaires.
- Se munir des gouttières qui vous ont été remises par votre chirurgien-dentiste.
- Faire pivoter le piston de la seringue afin de déverrouiller le mécanisme. Appliquer le gel de blanchiment dentaire NATURAL<sup>®</sup> par pression sur le piston de la seringue, un doseur intégré dans le mécanisme libère la quantité nécessaire à chaque dent.  
Faire pivoter le piston après usage afin de verrouiller le mécanisme (sécurité). **(Voir fig. 1,2)**



- Placer les gouttières sur les dents. Il n'est pas nécessaire de serrer fermement les mâchoires pour obtenir un meilleur résultat.
- Laisser poser dans la bouche pendant une heure, voire une heure et demie.
- Ôter les gouttières, puis se rincer la bouche.  
Rincer soigneusement les gouttières, les sécher et les replacer dans leur boîtier pour la prochaine séance que le patient réalisera à domicile, selon les instructions du chirurgien-dentiste.
- Appliquer le soin nourrissant et apaisant sur les dents et les gencives, en massage régulier, dans l'éventualité d'une sensibilité résiduelle.
- Renouveler la procédure complète tous les jours, selon les instructions de votre dentiste.
- Entre chaque session et en fin de traitement, repérer sur le nuancier le nombre de teintes gagnées depuis le début (teinte de départ).

#### **Compositions :**

##### ■ Gel de blanchiment dentaire NATURAL<sup>®</sup> / Activateur, 7 ml

Gel : Aqua, Hydrogen Peroxide, Silica, PE6-8

Activateur : Aqua, Glycerin, Carboxymethylcellulose, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Dead Sea Salt (natural), CI 14720

##### ■ Gel détachant, Powerprep<sup>+</sup>, de pH neutre, à l'usage exclusif des professionnels, 1,2 g



Distilled Water, Citric Acid, Potassium Nitrate, Fumed Silica, Pigments

##### ■ Dentifrice doux anti-taches, Powerprep<sup>+</sup>, 30 ml

Sorbitol 70%, Water (Aqua), Hydrated Silica, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Citrate, Sodium Monofluorophosphate, Cellulose Gum, Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Titanium Dioxide, Flavour (Supplement), Sodium Saccharin, Sodium Methylparaben, Sodium Propylparaben

##### ■ Soin nourrissant et apaisant, #5, 5 ml

Aqua, Potassium Nitrate, Sea salt, Polysorbate 20, Cellulose Gum, Aroma, Sodium Methylparaben, Potassium Sorbate, Dicalcium Phosphate, Eugenol, Eugenia Caryophyllata, Fluorure Sodium, Isoeugenol



■ À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil

LOT



Fab. : Meodental, 1, place Paul Verlaine - 92100 Boulogne Billancourt - France

[www.meodental.com](http://www.meodental.com)

[info@meodental.com](mailto:info@meodental.com)